



TROCAR ÓPTICO SIN CUCHILLA DESCARTABLE




Tapa de sellado hermético desmontable para la conveniencia de recuperar tejido.



Diseño de válvula escalable con conector Luer Lock, con sistema de seguridad, buen sellado. Los instrumentos de mano de diferentes diámetros no requieren reductor adicional para mejorar la eficiencia.



Tapa de sellado hermético, para proporcionar a los instrumentos manuales un canal de trabajo seguro y suave, sistema antifuga de CO2.

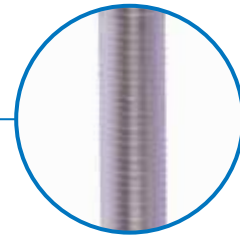

Diseño de Cánula Radiopaca, con estrías de fijación a la pared para evitar el desplazamiento durante la cirugía.



Aguja de punción visual sin cuchilla, profundidad de punción controlable, reducir la hemorragia del orificio de punción.

Descripción	Dimensión	Código	Cant. por paquete
Trocar Óptico sin cuchilla, estéril, desechable	φ5.5X100	121-51745	6pcs/caj;18cajs/ctn
	φ10.5X110	121-01745	6pcs/caj;18cajs/ctn
	φ12.5X110	121-81745	6pcs/caj;18cajs/ctn

Reg. San. Ecuador: 5228-DME-0718

Importado por

medecu

Elaborado por



A Mindray Company



TROCAR ÓPTICO SIN CUCHILLA DE 15 MM DESCARTABLE




Tapa de sellado hermético desmontable para la conveniencia de recuperar tejido.




Diseño de válvula escalable con conector Luer Lock, con sistema de seguridad, buen sellado. Los instrumentos de mano de diferentes diámetros no requieren reductor adicional para mejorar la eficiencia.



Tapa de sellado hermético, para proporcionar a los instrumentos manuales un canal de trabajo seguro y suave, sistema antifuga de CO₂.

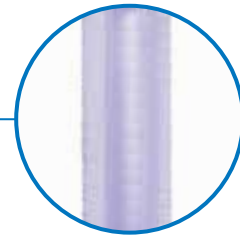

Diseño de Cánula Radiopaca, con estrías de fijación a la pared para evitar el desplazamiento durante la cirugía.

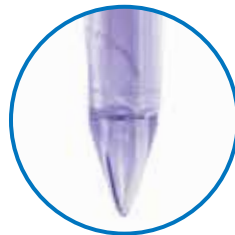

Aguja de punción visual sin cuchilla, profundidad de punción controlable, reducir la hemorragia del orificio de punción.

Los interruptores de instrumentos de diferentes diámetros (5/10/12/15mm) no requieren reductor adicional, todas las grapadoras endoscópicas de la serie pueden pasar de forma segura.

Descripción	Dimensión	Código	Cant. por paquete
Trocar Óptico sin cuchilla, estéril, desechable	φ15X100	121-61745	6pcs/caja; 18cajas/ctn

Reg. San. Ecuador: 5228-DME-0718

IMPORTADO
POR

medecu

ELABORADO
POR



A Mindray Company



TROCAR CON CUCHILLA DESCARTABLE




Tapa de sellado hermético desmontable para la conveniencia de recuperar tejido.



Diseño de válvula escalable con conector Luer Lock, con sistema de seguridad, buen sellado. Los instrumentos de mano de diferentes diámetros no requieren reductor adicional para mejorar la eficiencia.



Tapa de sellado hermético, para proporcionar a los instrumentos manuales un canal de trabajo seguro y suave, sistema antifuga de CO2.

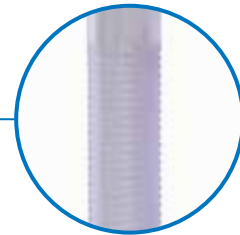

Diseño de Cánula Radiopaca, con estrías de fijación a la pared para evitar el desplazamiento durante la cirugía.



Aguja de punción metálica con cuchilla, profundidad de punción controlable, el dispositivo de protección se puede expulsar para evitar lesiones en los órganos abdominales mientras está en el abdomen.

Descripción	Dimensión	Código	Cant. por paquete
Trocar con cuchilla, estéril, desechable	φ5X100	121-51825	6pcs/caj;18cajs/ctn
	φ10X110	121-01825	6pcs/caj;18cajs/ctn
	φ12X110	121-81825	6pcs/caj;18cajs/ctn

Reg. San. Ecuador: 5228-DME-0718

IMPORTADO
POR

medecu

ELABORADO
POR



A Mindray Company



TROCAR SIN CUCHILLA DESCARTABLE




Tapa de sellado hermético desmontable para la conveniencia de recuperar tejido.



Diseño de válvula escalable con conector Luer Lock, con sistema de seguridad, buen sellado. Los instrumentos de mano de diferentes diámetros no requieren reductor adicional para mejorar la eficiencia.



Tapa de sellado hermético, para proporcionar a los instrumentos manuales un canal de trabajo seguro y suave, sistema antifuga de CO2.

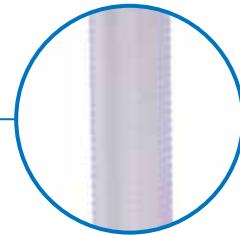

Diseño de Cánula Radiopaca, con estrías de fijación a la pared para evitar el desplazamiento durante la cirugía.



Aguja de punción sin cuchilla, profundidad de punción controlable, reducir la hemorragia del orificio de punción.

Descripción	Dimensión	Código	Cant. por paquete
Trocar sin cuchilla, estéril, desechable	φ5X100	121-51815	6pcs/caj; 18cajs/ctn
	φ10X110	121-01815	6pcs/caj; 18cajs/ctn
	φ12X110	121-81815	6pcs/caj; 18cajs/ctn

Reg. San. Ecuador: 5228-DME-0718

IMPORTADO
POR

medecu

ELABORADO
POR



A Mindray Company